


空腸用 経腸栄養用チューブ

Kangaroo™ 胃瘻バルーンカテーテル ジェジュナルタイプ

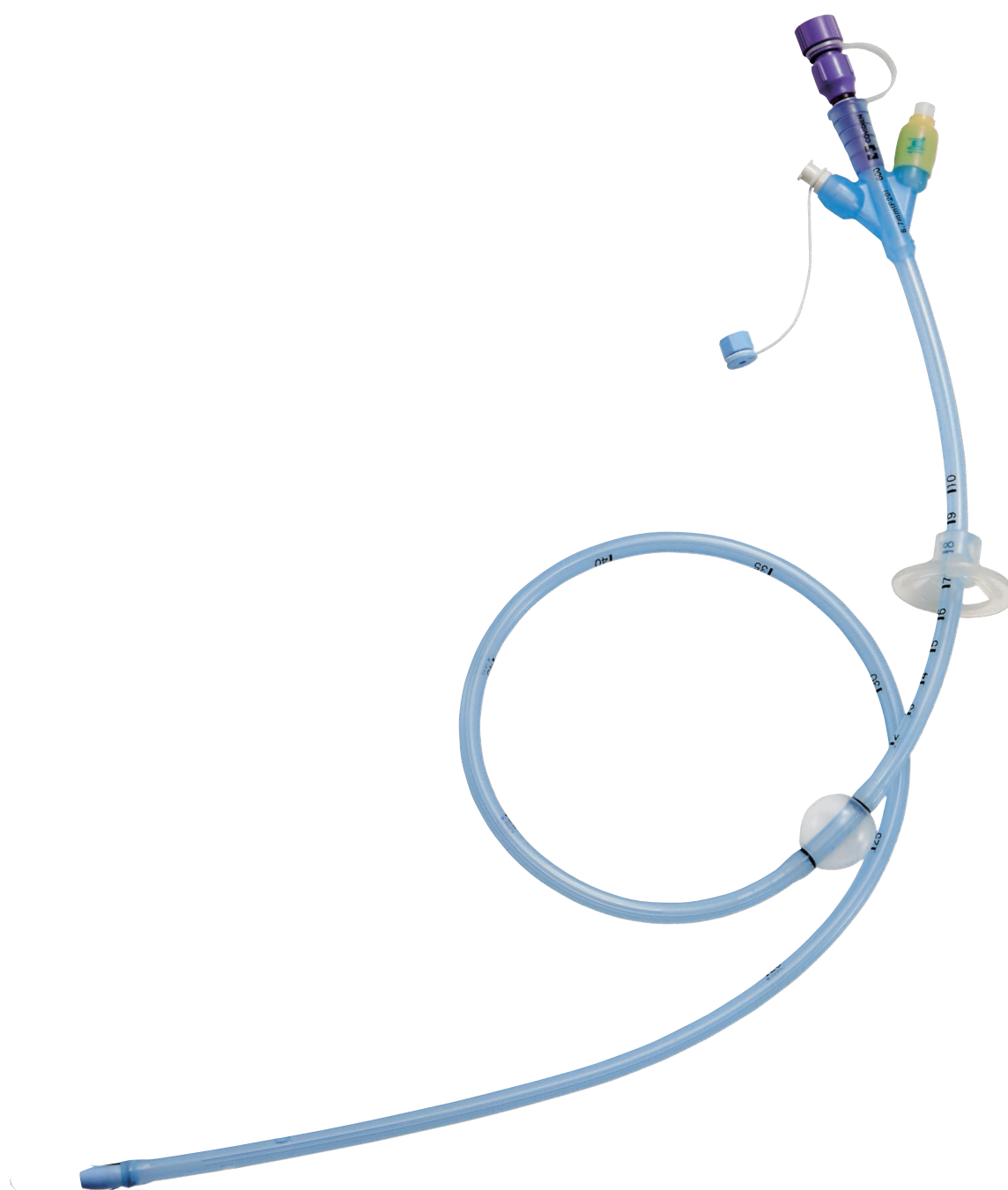

ENFit®

CardinalHealth™
Kangaroo 

Kangaroo™

胃瘻バルーンカテーテル ジェジュナルタイプは、空腸へ経腸栄養剤を注入するために使用する経腸栄養チューブです。

1. 減圧ルーメンで胃の圧力を低減



胃に溜まるガスを減圧ルーメンで吸引し、圧力を低減させます。また、胃内減圧ルーメンに減圧用延長チューブを接続することで、減圧時の取り回しが良くなります。

2. 栄養剤が詰まりにくい

内径の大きいシリコンチューブを採用し、栄養剤が詰まりにくい設計です。

3. 挿入性にすぐれた仕様

テーパ形状の先端部が挿入時の抵抗を軽減し、X線造影性のある先端部によりX線透視下で目的部位への留置が可能です。また、親水性ガイドワイヤにより、チューブの挿入を容易にします。付属のガイドワイヤ用T型コネクタにより、挿入中のガイドワイヤの固定も可能です。

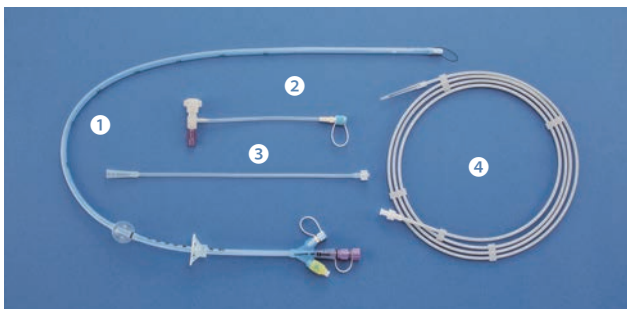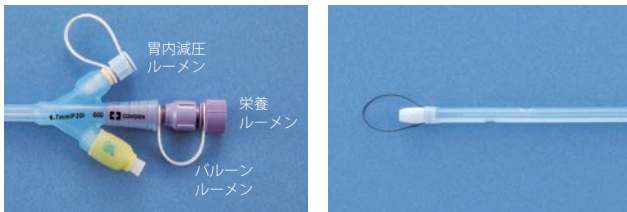

キット内容

- ① ジェジュナルチューブ 1本
- ② ガイドワイヤ用 T型コネクタ 1本
- ③ 減圧用延長チューブ 1本
- ④ 親水性ガイドワイヤ 1本(全長2,400mm/外径 0.045inch)

カタログ番号	外径 (mm)	先端	バルーン容量 (mL)	腸内チューブ全長 (mm)
37JT203	6.7 (20Fr)	把持糸タイプ	10	600

包装単位: 1キット毎滅菌済 1キット/箱

再使用禁止

一般的名称 : 短期的使用胃瘻栄養用チューブ 特定保険医療材料名: 胃瘻カテIII
販売名 : 胃瘻/バルーンカテーテル クラス分類 : II 管理医療機器
医療機器認証番号 : 221ADBZX00031000 製造販売元 : 富士システムズ株式会社

Cardinal Healthは、Global Enteral Device Supplier Association (GEDSA) の会員です。
GEDSAは、患者の安全性を高めることを目的とした医療機器用チューブコネクタの国際規格の導入を支援するために設立されました。
ENFit™はGEDSAの商標です。

©2019 Cardinal Health. All Rights Reserved.
CARDINAL HEALTH, Cardinal Healthロゴ及びKANGAROOはCardinal Healthの商標又は登録商標です。

CardinalHealth™
Kangaroo



お問い合わせ先
カーディナルヘルス株式会社
Tel: 0120-917-205

cardinalhealth.jp

ct-en-fnt
2306.OPPes