

バリエーション豊かな シリコーン製バルーン

Kangaroo™ 胃瘻バルーンカテーテル / 胃瘻バルーンカテーテル I



ENFit®

CardinalHealth™
Kangaroo 


体外留置部分の形状を コンパクトに 設計しました



BALLOON BUTTON SMALL TYPE

バルーンボタン スモールタイプ

- 90mmタイプのフィーディング・減圧チューブを使用することで、粘性の高い栄養剤にも対応可能です。
- 交換時はスタイレットで瘻孔確保が容易です。
- 本体先端部はテーパ形状となり、挿入時の抵抗を軽減します。
- バルーンがリンゴ形状に膨らみ、シャフトによる胃壁の損傷を軽減します。
- バルーン収縮時、縦にひだが生じるため、抜去時の抵抗を軽減します。

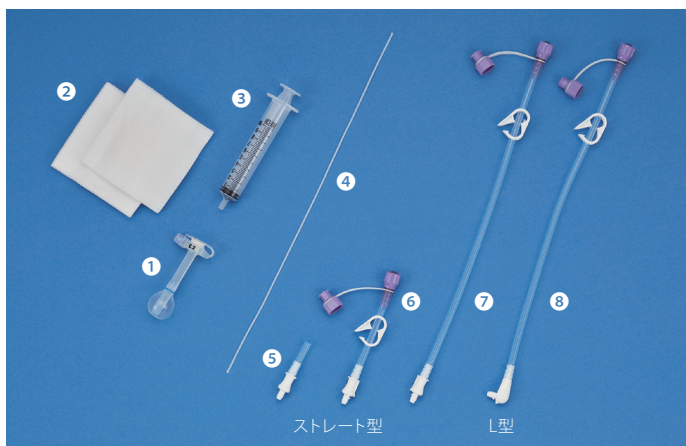

キット内容

- ① ボタン 1本
- ② ガーゼ 5枚
- ③ シリンジ 1本
- ④ スタイレット 1本
- ⑤ アダプタ(逆止弁開口用) 1本
- ⑥ フィーディング・減圧チューブ ストレート型 1本(全長90mm)
- ⑦ フィーディング・減圧チューブ ストレート型 1本(全長280mm)
- ⑧ フィーディング・減圧チューブ L型 1本(全長280mm)

BALLOON TUBE

バルーンチューブ


- 瘻孔部に直接接触しない形状の体外固定板とマーキングを施したチューブで、瘻孔の観察がしやすくなりました。
- これにより、バンパー埋没症候群や幽門部狭窄の軽減が期待できます。
- 交換時はスタイレットで瘻孔確保が容易です。
- 本体先端部はテーパ形状となり、挿入時の抵抗を軽減します。
- バルーンがリンゴ形状に膨らみ、シャフトによる胃壁の損傷を軽減します。
- バルーン収縮時、縦にひだが生じるため、抜去時の抵抗を軽減します。
- ISO-80369-3コネクタに接続可能な大口径コネクタを装備した胃瘻バルーンカテーテルⅠが新登場。胃瘻用内視鏡の挿入も可能です。(適応サイズ20-24Fr)
コネクタの形状がシンプルなので、毎回のお手入れが容易に行えます。



胃瘻バルーンカテーテルⅠ

大口径で毎日のお手入れを容易にします。


胃瘻バルーンカテーテル バルーンチューブ

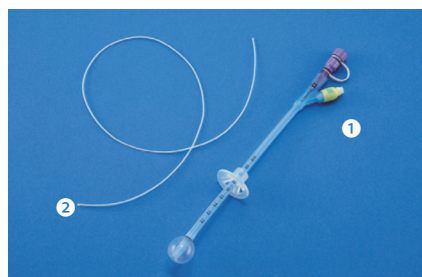

キット内容

- ① チューブ 1本
- ② スタイレット 1本

胃瘻バルーンカテーテルⅠ バルーンチューブ

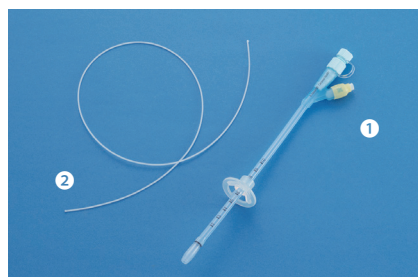

キット内容

- ① チューブ 1本
- ② スタイレット 1本

ACCESSORIES


アクセサリ

フィーディング・減圧チューブ

- バルーンボタン スモールタイプ専用のフィーディング・減圧チューブです。ストレート型とL型の2種類があります。

カタログ番号	接続タイプ	全長	包装単位
37BBS09S3	ストレート型	90mm	5本/箱
37BBS28S3		280mm	
37BBS28L3	L字型	280mm	
37BBS60L3		600mm	

包装毎滅菌済
再使用禁止

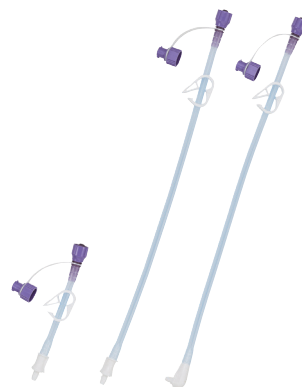

フィーディング・減圧チューブ

内視鏡アダプタ／エア注入用ポンプ

- 内視鏡アダプタ(チューブ用)を接続しエア注入用ポンプを接続することにより、内視鏡の挿入とエア注入が同時に行えます。

カタログ番号	品名	包装単位
37BP	エア注入用ポンプ	1個/箱
37BTA1	内視鏡アダプタ 胃瘻バルーンカテーテルⅠ専用	1個/箱

包装毎滅菌済
再使用禁止



エア注入用ポンプ 内視鏡アダプタ

胃瘻バルーンカテーテル
バルーンボタン スモールタイプ

カタログ番号	外径 (mm)	シャフト長 (mm)	バルーン容量 (mL)
37BBS12103	4.0 (12Fr)	10	3
37BBS12153		15	
37BBS12203		20	
37BBS12253		25	
37BBS12303		30	
37BBS14103	4.7 (14Fr)	10	4
37BBS14153		15	
37BBS14203		20	
37BBS14253		25	
37BBS14303		30	
37BBS14353		35	
37BBS14403		40	
37BBS14453		45	
37BBS16103		5.3 (16Fr)	
37BBS16153	15		
37BBS16203	20		
37BBS16253	25		
37BBS16303	30		
37BBS16353	35		
37BBS16403	40		
37BBS16453	45		
37BBS20203	6.7 (20Fr)		20
37BBS20253		25	
37BBS20303		30	
37BBS20353		35	
37BBS20403		40	
37BBS20453	45		
37BBS24203	8.0 (24Fr)	20	10
37BBS24253		25	
37BBS24303		30	
37BBS24353		35	
37BBS24403		40	
37BBS24453	45		

包装: 1キット毎滅菌済 包装単位: 1キット/箱 再使用禁止

一般的名称 : 短期的使用胃瘻栄養チューブ
販売名 : 胃瘻バルーンカテーテル
医療機器承認番号 : 221ADBZX00031000
特定保険医療材料名 : 胃瘻カテII
クラス分類 : II 管理医療機器
製造販売元 : 富士システムズ株式会社

一般的名称 : 短期的使用胃瘻栄養チューブ
販売名 : 胃瘻バルーンカテーテル I
医療機器承認番号 : 30100BZX00256000
特定保険医療材料名 : 胃瘻カテI
クラス分類 : II 管理医療機器
製造販売元 : 富士システムズ株式会社

Cardinal Healthは、Global Enteral Device Supplier Association (GEDSA) の会員です。
GEDSAは、患者の安全性を高めることを目的とした医療機器用チューブコネクタの国際規格の導入を支援するために設立されました。
ENFit™はGEDSAの商標です。

©2022 Cardinal Health. All Rights Reserved.
CARDINAL HEALTH、Cardinal Healthロゴ、KANGAROOはCardinal Healthの商標又は登録商標です。

胃瘻バルーンカテーテル
バルーンチューブ

カタログ番号	外径 (mm)	有効長 (mm)	バルーン容量 (mL)
37BT123	4.0 (12Fr)	195	3
37BT143	4.7 (14Fr)		4
37BT163	5.3 (16Fr)		5
37BT183	6.0 (18Fr)		10
37BT203	6.7 (20Fr)		
37BT223	7.3 (22Fr)		
37BT243	8.0 (24Fr)		

包装単位: 1本毎滅菌済 1本/箱 再使用禁止

胃瘻バルーンカテーテル I
バルーンチューブ

カタログ番号	外径 (mm)	有効長 (mm)	バルーン容量 (mL)
37BT121	4.0 (12Fr)	195	3
37BT141	4.7 (14Fr)		4
37BT161	5.3 (16Fr)		5
37BT181	6.0 (18Fr)		10
37BT201	6.7 (20Fr)		
37BT221	7.3 (22Fr)		
37BT241	8.0 (24Fr)		

包装単位: 1本毎滅菌済 1本/箱 再使用禁止



お問い合わせ先
カーディナルヘルス株式会社
Tel : 0120-917-205

cardinalhealth.jp

ct-en-fpeg
2211.pdf.es