

Salem Sump™ セイラム サンプ™ チューブ


# 逆流防止弁付で 快適な医療環境



## セイラム サンプ™ チューブ の特長


- 逆流防止弁が逆流による汚染を防ぎ、看護業務のゆとりと、医療環境を快適に保ちます。

### 正常に機能している時の状況

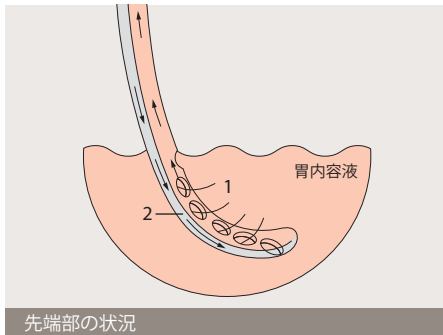


先端部の状況

1. 胃内容液は、排液腔に引き込まれます。
2. 側孔にかかった吸引圧は、エアールーメンを通して流入する空気によって適切な圧に維持されます。

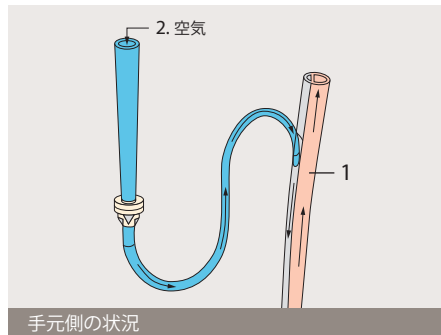

手元側の状況

1. 胃内容液は、排液腔から排液されます。
2. 空気が一方弁を通してエアールーメンに流入します。

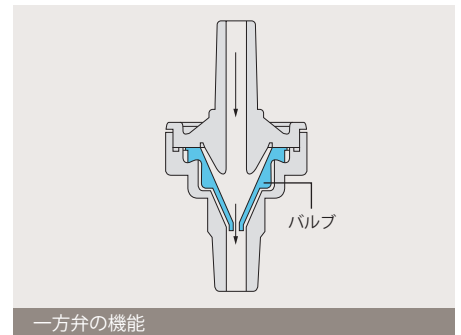

一方弁の機能

1. 胃内容液は、排液腔から排液されます。
2. 空気が一方弁を通してエアールーメンに流入します。

### セイラム サンプ チューブ (逆流防止弁付)

カタログ番号	カテーテル	全長 (cm)
	外径 (mm)	
3201-10	3.3 (10Fr)	88
3201-12	4.0 (12Fr)	120
3201-14	4.7 (14Fr)	
3201-16	5.3 (16Fr)	
3201-18	6.0 (18Fr)	
3201-8-S	2.7 (8Fr)	88
3201-10-S	3.3 (10Fr)	120
3201-12-S	4.0 (12Fr)	
3201-14-S	4.7 (14Fr)	
3201-16-S	5.3 (16Fr)	
3201-18-S	6.0 (18Fr)	

S…ソフトタイプ 包装：1本毎滅菌済 包装単位：50本/箱 ピールバック入り 再使用禁止  
材質：ポリ塩化ビニル

#### 製品規格

一般的名称：短期的使用胃食道用滅菌済みチューブ及びカテーテル  
販売名：セイラム サンプ チューブ  
医療機器認証番号：225AABZX00046000  
クラス分類：II 管理医療機器



cardinalhealth.jp

製品情報・  
FAQサイトは  
こちら



お問い合わせ先  
カーディナルヘルス株式会社  
TEL 0120-917-205