

2023年10月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

### 仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度「カンガルーボタンⅡ」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます

敬具


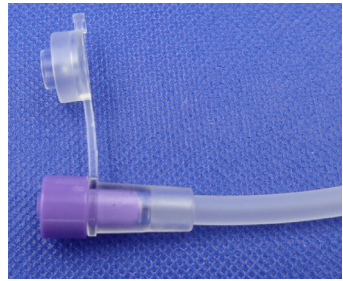
#### — 記 —

販売名：カンガルーボタンⅡ

変更箇所：① コネクタ形状/材質 ② チューブ接着部形状/材質

変更内容：

- ① コネクタ形状/材質：より耐油性がある材質に変更
- ② チューブ接着部形状/材質：接着部をチューブと同じ材質に変更

変更箇所	現	新
① コネクタ形状/材質 ② チューブ接着部形状/材質		

変更理由：

クラック対策：より耐油性がある材質に変更

チューブ抜け対策：接着部をチューブと同様にすることで接着力を向上

コネクタ直下のチューブ亀裂・破断対策：接着部に柔軟性を持たせることで、一ヶ所に負荷が集中することを防止

変更時期：2023年10月より順次

(在庫状況による前後する場合がございます。)

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	ロット番号	リリース予定日
3733-1615	未定	未定
3733-1620	未定	未定
3733-1625	未定	未定
3733-1630	未定	未定
3733-1635	未定	未定
3733-2015	未定	未定
3733-2020	未定	未定
3733-2025	23L0303	2023/11/8
3733-2030	23K0496	2023/10/27
3733-2035	23L0387	2023/11/14
3733-2040	23L0299	2023/11/6
3733-2045	未定	未定
3733-2050	未定	未定
3733-2420	未定	未定
3733-2425	未定	未定
3733-2430	23L0386	2023/11/10
3733-2435	23L0394	2023/11/16
3733-2440	23L0298	2023/11/1
3733-2445	23L0302	2023/11/7
3733-2450	23M0348	2023/12/11
3733-2455	未定	未定

販売名：カンガルーボタンⅡ

医療機器承認番号：21600BZZ00252000

一般的名称：長期的使用胃瘻用ボタン

JMDNコード：38565003

クラス分類：Ⅲ 高度管理医療機器

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。  
 カーディナルヘルス株式会社 製品情報・FAQ サイト  
<https://cardinalhealth-info.jp/>

